



crownceram

LABORATOIRE DENTAIRE DEPUIS 1983

PRODUIT
06

Céramo-Céramique
Zircone

Céramo-Céramique Zircone

RÉSISTANCE ET BIOCOMPATIBILITÉ

Avec un recul de plusieurs dizaines de milliers de cas réalisés par le laboratoire Crown Ceram, c'est l'une des restaurations de référence grâce aux hautes technologies de la CFAO et au travail de rigueur et d'exigence des prothésistes



GARANTIE
5
ans

CÉRAMO-CÉRAMIQUE ZIRCONÉ

INDICATIONS

Couronne unitaire
Bridge - Bridge Maryland
Armature teintée dans la masse.
Inlay core opacifié et pilier implantaire Titane anodisé recommandés

PRÉPARATION

Congé - Épaulement

CIMENTATION

Ciment classique - Collage - Verre ionomère
Pas de scellement en provisoire

FOURNISSEURS

Sagemax, USA : armature Zircone
Aesthetic-Press, Allemagne : recouvrement cosmétique des armatures

NORMES


Sagemax : CE 0086 / NF EN ISO 6872
Aesthetic-Press : CE 0535 / NF EN ISO 6872

MATÉRIAUX

NexxZrT de Sagemax
AP Volution Z d'Aesthetic-Press

Caractéristiques techniques uniques pour cette restauration avec chape usinée, fiable et esthétique :

- **Résistance à la flexion de 1150 MPa** (à plus ou moins 50 MPa près). Idéal pour les bridges de longue portée (pas plus de 2 éléments contigus)
- **Biocompatibilité** : excellente tolérance parodontale, haute résistance à toutes formes de corrosion et d'attaques chimiques
- **Esthétique** : plus de liseré métallique à la limite cervicale, translucidité pour un reflet de la lumière aussi naturelle que l'émail biologique
- Précision de la CFAO, **solidité des bords pour une très bonne adaptation.**

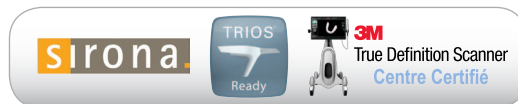

LABORATOIRE CROWN CERAM
PARC D'ACTIVITÉS DU PAYS DE THANN
760 RUE AUGUSTE SCHEURER KESTNER
68700 ASPACH-MICHELBACH
☎ 03 89 57 67 22

WWW.CROWNCERAM.COM - INFO@CROWNCERAM.COM

Origine France
Garantie

Audité par
BUREAU VERITAS
Certification



Liste des produits sur
tdg.bureauveritas.fr




BVCert. 0012849

CÉRAMO-CÉRAMIQUE ZIRCON

RÉSISTANCE ET BIOCOMPATIBILITÉ

GUIDE ET RECOMMANDATIONS DE PRÉPARATION ET DE TAILLE

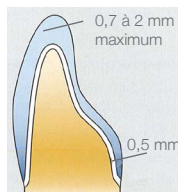


Couronnes antérieures et postérieures

Épaisseur de la chape : minimum 0,5 mm

Épaisseur du recouvrement cosmétique : 0,7 à 1,5 mm maximum

Épaisseur totale préparation optimale : 1,2 à 2 mm maximum

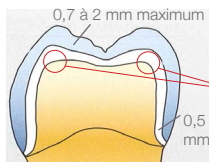

En palatin et en lingual : 0,5 mm avec un contact sur la Zircon
(= bite-stop)

Éviter les angles vifs

ZOOM SUR LA GESTION DU MANQUE DE PLACE

Dans le cas d'un espace compris entre 0,5 et 1 mm entre la préparation et l'antagoniste, le laboratoire réalisera au besoin un bite-stop pour assurer le minimum d'épaisseur requis par le matériau sans compromettre l'esthétique.

Si vous ne souhaitez pas que le laboratoire réalise un bite-stop par défaut sur vos prothèses, merci d'en informer le laboratoire par téléphone au 03.89.57.67.22 ou par mail à labo@crownceram.com.



LABORATOIRE CROWN CERAM

PARC D'ACTIVITÉS DU PAYS DE THANN
760 RUE AUGUSTE SCHEURER KESTNER
68700 ASPACH-MICHELBAACH
☎ 03 89 57 67 22

WWW.CROWNCERAM.COM - INFO@CROWNCERAM.COM

Origine France
Garantie

Audité par
BUREAU VERITAS
Certification

Liste des produits sur
otg.bureauveritas.fr



BVCert. 0012849