



**crownceram**  
LABORATOIRE DENTAIRE DEPUIS 1983

PRODUIT  
06

Céramo-Céramique  
Zircone

# Céramo-Céramique Zircone

## RÉSISTANCE ET BIOCOMPATIBILITÉ

Avec un recul de plusieurs dizaines de milliers de cas réalisés par le laboratoire Crown Ceram, c'est l'une des restaurations de référence grâce aux hautes technologies de la CFAO et au travail de rigueur et d'exigence des prothésistes



### CÉRAMO-CÉRAMIQUE ZIRCONÉ

#### INDICATIONS

Couronne unitaire  
Bridge - Bridge Maryland  
Armature teintée dans la masse.  
Inlay core opacifié et pilier implantaire Titane anodisé recommandés

#### PRÉPARATION

Congé - Épaulement

#### CIMENTATION

Ciment classique - Collage - Verre ionomère  
Pas de scellement en provisoire

#### FOURNISSEURS

Sagemax, USA : armature Zircone  
Aesthetic-Press, Allemagne : recouvrement cosmétique des armatures

#### NORMES

Sagemax : CE 0086 / NF EN ISO 6872  
Aesthetic-Press : CE 0535 / NF EN ISO 6872

#### MATÉRIAUX

NexxZrT de Sagemax  
AP Volution Z d'Aesthetic-Press

Caractéristiques techniques uniques pour cette restauration avec chape usinée, fiable et esthétique :

- **Résistance à la flexion de 1150 MPa** (à plus ou moins 50 MPa près). Idéal pour les bridges de longue portée (pas plus de 2 éléments contigus)
- **Biocompatibilité** : excellente tolérance parodontale, haute résistance à toutes formes de corrosion et d'attaques chimiques
- **Esthétique** : plus de liseré métallique à la limite cervicale, translucidité pour un reflet de la lumière aussi naturelle que l'émail biologique
- Précision de la CFAO, **solidité des bords pour une très bonne adaptation.**

3shape  
TRIOS Ready

sirona

Carestream  
DENTAL

īTero®

MEDIT

#### LABORATOIRE CROWN CERAM

PARC D'ACTIVITÉS DU PAYS DE THANN  
760 RUE AUGUSTE SCHEURER KESTNER  
68700 ASPACH-MICHELBACH  
☎ 03 89 57 67 22

WWW.CROWNCERAM.COM - INFO@CROWNCERAM.COM

Origine France  
Garantie

Audité par  
BUREAU VERITAS  
Certification



Liste des produits sur  
tdg.bureauveritas.fr




BVCert. 0012849

# CÉRAMO-CÉRAMIQUE ZIRCONE

## RÉSISTANCE ET BIOCOMPATIBILITÉ

### GUIDE ET RECOMMANDATIONS DE PRÉPARATION ET DE TAILLE

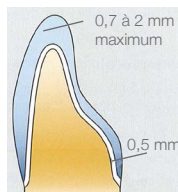


#### Couronnes antérieures et postérieures

Épaisseur de la chape : minimum 0,5 mm

Épaisseur du recouvrement cosmétique : 0,7 à 1,5 mm maximum

Épaisseur totale préparation optimale : 1,2 à 2 mm maximum

En palatin et en lingual : 0,5 mm avec un contact sur la Zirconie  
(= bite-stop)

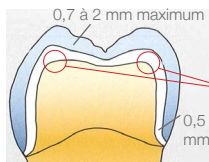

Éviter les angles vifs

### ZOOM SUR LA GESTION DU MANQUE DE PLACE

Dans le cas d'un espace compris entre 0,5 et 1 mm entre la préparation et l'antagoniste, le laboratoire réalisera au besoin un bite-stop pour assurer le minimum d'épaisseur requis par le matériau sans compromettre l'esthétique.

Si vous ne souhaitez pas que le laboratoire réalise un bite-stop par défaut sur vos prothèses, merci d'en informer le laboratoire par téléphone au 03.89.57.67.22 ou par mail à [labo@crownceram.com](mailto:labo@crownceram.com).

